

持針器

▶ ヘガール持針器 超硬チップ付	039
▶ マイクロバスキュラー持針器	040
▶ ライダー型持針器	041
▶ 剪刀付持針器	041
▶ ヘガール持針器 チップ無	041
▶ マッチウ持針器 超硬チップ付	042
▶ 丹下式持針器	043
▶ 仏式マッチウ持針器 チップ無	043
▶ マッチウ持針器 チップ無	044
▶ ローゼル持針器	045
▶ その他持針器	045

Product form



BOX

例：TY-210SS、TY-200S、TY-202M

支点部分が固定されているため、かみ合わせがズレにくいタイプです。



ハズシ

例：TY-220SS、TY-221S、TY-240S


支点部分を外すことができます。洗浄しやすく衛生的です。基本的に「チップなし」に使用されます。



チップ付

例：TY-210SS、TY-200S、TY-202M

超硬チップ(TCチップ)が貼り付けてあります。硬い素材のため摩擦力が強く、主に丸針に使用されます。摩耗したら新しいチップに交換することができます。目印として柄に金メッキを施しています。

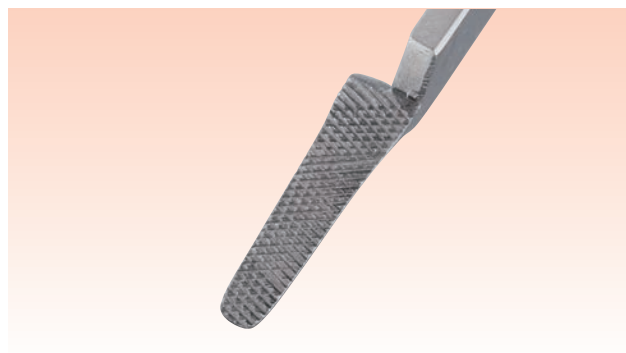

チップなし

例：TY-230SS、TY-222S、TY-240S

チップの付いていないタイプです。主に角針に使用されます。把持部中央に溝がついているものもあります。

		縫合針-チップ対応表				
		粗い←	チップ目の粗さ			→細かい
		0.5	0.4	0.3	0.2	スムーズ
針の太さ	↑	~3-0				
		4-0				
		5-0				
		6-0				
		7-0				
		8-0				
		9-0				
		10-0				
		↓				
		11-0~				



チップ付 チップなし

ヘガール持針器 超硬チップ付



持針器


コンバース持針器

TY-203 チップ付 11.5cm




ヘガール持針器

TY-204 チップ付 12.5cm
TY-214 チップ付 12.5cm

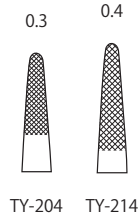

ウェブスター持針器

TY-215 チップ付 13cm

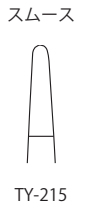

マイクロヘガール持針器

TY-260 チップ付 11.5cm



形成ヘガール持針器


TY-261 チップ付 12.5cm



へガール持針器





TY-210SS	チップ付	14cm
TY-210S	チップ付	16cm
TY-210M	チップ付	19cm
TY-210L	チップ付	21cm

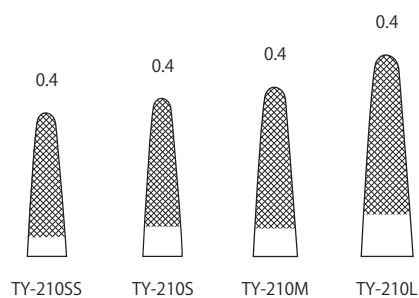

マイクロバスキュラー持針器

TY-217SS	チップ付	12.5cm
----------	------	--------


TY-217S	チップ付	15cm
TY-217M	チップ付	18cm
TY-217L	チップ付	20cm

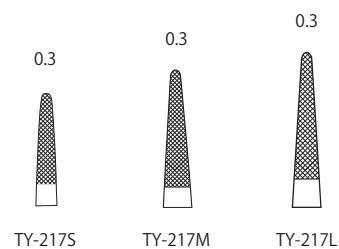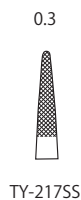

ライダー型持針器・剪刀付持針器 ヘガール持針器 チップ無



持針器

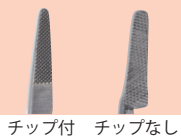


チップ付 チップなし

ライダー型ヘガール持針器



TY-213SS	チップ付	12.5cm
TY-213S	チップ付	15cm
TY-213M	チップ付	18cm
TY-213L	チップ付	20cm

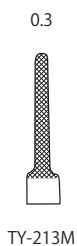


剪刀付持針器 ネジ止




TY-212S	チップ付	14cm
TY-212M	チップ付	17cm
TY-212L	チップ付	19cm




ヘガール持針器 チップ無

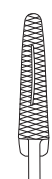


TY-231

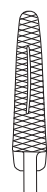


TY-230SS

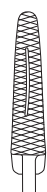


TY-230S

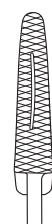


TY-230M

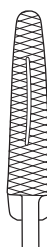

TY-230L

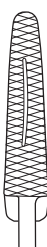

TY-230-24

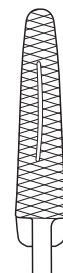

TY-230-26

TY-231	12.5cm
TY-230SS	14cm
TY-230S	16cm
TY-230M	19cm
TY-230L	21cm
TY-230-24	24cm
TY-230-26	26cm


マッチウ持針器 超硬チップ付

持針器

仏式マッチウ持針器




TY-200S	チップ付	16cm
TY-200M	チップ付	19cm
TY-200L	チップ付	21cm
TY-200LL	チップ付	23cm

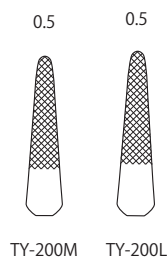

マッチウ持針器




TY-211S	チップ付	14cm
TY-211M	チップ付	17cm
TY-211L	チップ付	20cm

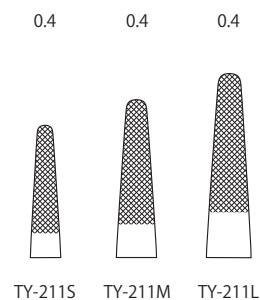

先細仏式マッチウ持針器




TY-208S	チップ付	16cm
TY-208M	チップ付	19cm
TY-208L	チップ付	21cm
TY-208LL	チップ付	23cm

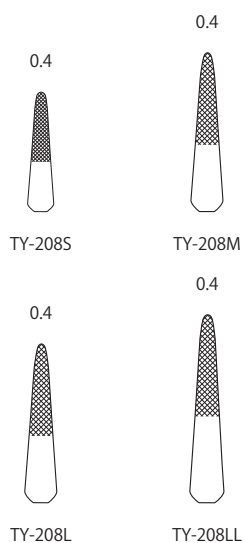

深部用マッチウ持針器



TY-205L	チップ付	21cm
TY-205LL	チップ付	22cm

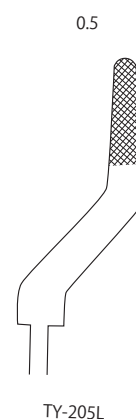



チップ付 チップなし

丹下式持針器・仏式マッチウ持針器 チップ無



持針器

丹下式持針器 (口蓋裂用)



TY-218S	チップ付 曲 16cm
TY-218L	チップ付 曲 19cm



TY-218L

仏式マッチウ持針器 チップ無



TY-222S	16cm
TY-222M	19cm
TY-222L	21cm

仏式マッチウ持針器 チップ無 ハズシ



TY-221S	16cm
TY-221M	19cm
TY-221L	21cm



マッチウ持針器 チップ無

持針器

マッチウ持針器 チップ無



TY-225SS	14cm
TY-225S	16cm
TY-225M	19cm
TY-225L	21cm




TY-225M

マッチウ持針器 チップ無 ハズシ



TY-220SS	14cm
TY-220S	16cm
TY-220M	19cm
TY-220L	21cm

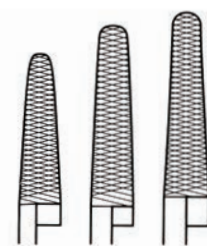


TY-220S TY-220M TY-220L

先細マッチウ持針器 チップ無 ハズシ



TY-224S	16cm
TY-224M	19cm
TY-224L	21cm

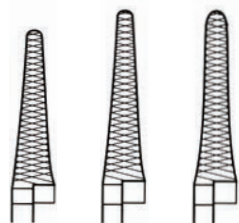

TY-224S TY-224M TY-224L

深部用マッチウ持針器 チップ無 ハズシ




TY-250M	19cm
TY-250L	21cm
TY-250LL	22cm



チップ付 チップなし

ローゼル持針器

TY-202M	チップ付	19cm
TY-202L	チップ付	21cm

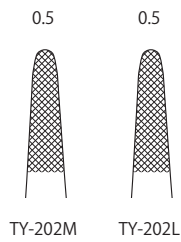

ローゼル持針器 チップ無 ハズシ

TY-240S	16cm
TY-240M	19cm
TY-240L	21cm
TY-240LL	22cm



深部用ローゼル持針器
チップ無 ハズシ

TY-251M	19cm
TY-251L	21cm
TY-251LL	22cm



東大式ポイント持針器
チップ無 ネジ止

TY-245	15.5cm
--------	--------



河本氏持針器 ネジ止

N-05	13cm
------	------





持針器